


en partenariat avec



[www.innov-sa.com](http://www.innov-sa.com)



*Collection*  
2018

Guide  
Dispositifs  
Médicaux



# Quel fauteuil dois-je choisir ?

Possibilité de prise en charge  
sur recommandations médicales spécifiques

	Weely Nov' <i>Manuel</i>	Signature 1 moteur <i>Electrique</i>	Premium <i>Electrique</i>	Elysée <i>Manuel</i>	Elysée e <i>Electrique</i>	Montmartre <i>Manuel</i>
<b>Mobilité</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
<b>Se relever sans effort</b>	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
<b>Autonomie électrique</b>	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆☆
<b>Bien-Etre &amp; Confort</b>	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	<i>Non adapté aux personnes seules</i>			<i>Non adapté aux personnes seules</i>		<i>Non adapté aux personnes seules</i>

Pas de possibilité de prise en charge (sauf dossier MDPH)

	Cocoon 1 moteur <i>Electrique</i>	Cocoon 2 moteurs <i>Electrique</i>	Cocoon XXL 1 moteur <i>Electrique</i>	NoStress <i>Manuel</i>	NoStress 1 moteur <i>Electrique</i>
<b>Mobilité</b>	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
<b>Se relever sans effort</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
<b>Autonomie électrique</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★
<b>Bien-Etre &amp; Confort</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

The background consists of several vertical stripes of different colors: dark blue, brown, grey, light blue, red, and yellow. A purple diagonal banner runs across the center, containing the title text.

# *Dispositifs médicaux*

Documentation destinée aux professionnels de santé – Photos non contractuelles

Conception et impression : Imprimerie La Renaissance - Pont-Sainte-Marie (Aube)

# CARACTÉRISTIQUES

## Fauteuil roulant manuel pliant

**Largeur d'assise**  
39 cm / 44 cm / 49 cm

**Réglage d'assise en largeur**  
+5 cm

**Profondeur d'assise**  
De 32 cm à 41 cm

**Hauteur sol / siège**  
48 cm sans couette /  
54 cm avec couette

**Hauteur de dossier**  
70 cm à 79 cm

**Longueur du repose jambes**  
40 cm à 60 cm

**Inclinaison d'assise**  
0° à 20°

**Inclinaison du dossier**  
85° à 120°

**Potences de repose pieds**  
Réglables en largeur de +5 cm  
et en profondeur de +9 cm

**Palettes de repose pieds**  
Réglables en angle, hauteur et profondeur

**Accoudoirs**  
Réglables en hauteur de +7 cm et amovibles

**Dimensions pliées**  
L 81 cm x P 68 cm x I taille du fauteuil + 18 cm

**Accessoires optionnels**  
Tablette Latérale, Tablette Ventrale,  
Coussin Visco Classe II  
Cale tronc  
Surpalette

**Châssis**  
Acier

**Poids maxi de l'utilisateur**  
140 Kg

**Couleur**  
Gris Titane / Noir

**Poids du fauteuil avec ses couettes**  
38 kg

**Largeur hors tout du fauteuil**  
Largeur d'assise +18 cm

**Longueur hors tout avec repose pieds**  
115 cm

Possibilité de prise  
en charge sur recommandations  
médicales spécifiques

### Mobilité



Se relever sans effort



Autonomie électrique



Bien-Etre & Confort



# Le Weely Nov

## Manuel

Le fauteuil roulant de confort Weely Nov, grâce à ces réglages multiples s'adapte à la morphologie de chacun.

La position centrale des roues permet à son occupant d'être autonome dans ses petits déplacements quotidiens. Stable même en position inclinée à 35°, doté d'un châssis 6 roues avec amortisseurs le fauteuil roulant de confort Weely Nov permet une maîtrise parfaite des trajectoires ainsi qu'une grande maniabilité (effet compas / rotation à 360°).

Comme tous les produits Innov SA le dossier, l'assise, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30°.

La couette constituée de 7 éléments dissociables offre 4 Design de fauteuil.

## Coloris

Revêtement **PVC/PU**  
Imperméable

Revêtement polyester  
**Velours** déperlant

**Tissu** chiné



Noir



Framboise



Grège



Marron



Gris

## Options



Tablette latérale



Coussin Visco Classe II



Tablette ventrale




Cale-tronc



Surpalette



# Weely Nov

Couettes amovibles lavables  
en machine à 



Brevets déposés

Finition polyester-Velours-Marron

# CARACTÉRISTIQUES

Fauteuil roulant électrique

Largeur d'assise :

39cm / 44 cm / 49 cm

Largeur hors tout du fauteuil :

+23 cm

Profondeur d'assise :

de 37 cm à 52 cm

Hauteur de dossier :

66 cm

Inclinaison d'assise :

0° à 20°

Inclinaison du dossier :

89° à 130°

Longueur du repose jambes :

34 cm à 40 cm

Poids du fauteuil avec ses accessoires :

55 kg

Potences de repose pieds :

réglables en largeur et profondeur

Palettes de repose pieds : réglables

en angle, hauteur et profondeur

Accoudoirs :

réglables en largeur et profondeur

Hauteur d'accoudoirs : 18 cm à 22 cm

sans couettes d'accoudoirs / 22cm à 28

cm avec couettes d'accoudoirs

Poids maxi de l'utilisateur : 140 kg

Châssis : Acier

Possibilité de prise  
en charge sur recommandations  
médicales spécifiques

Mobilité

★★★★★

Se relever sans effort

☆☆☆☆☆

Autonomie électrique

★★★★★

Bien-Être & Confort

★★★★☆

# Le Signature

## — Electrique —

Le fauteuil roulant électrique Signature, grâce à ses réglages multiples s'adapte à la morphologie de chacun. Le Signature est recouvert d'un capitonnage afin d'amortir chocs et risques de blessures. La propulsion du fauteuil est facilitée par le placement central des grandes roues, le châssis 6 roues permet une maîtrise parfaite des trajectoires et une grande maniabilité (effet compas).

Comme tous les produits Innov'SA, le dossier, l'assise, l'appuie tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuse, amovible, remplaçable et lavables à 30°


La couette constituée de 7 éléments dissociables pour 4 Design de fauteuil.

Le fauteuil roulant SIGNATURE permet de conserver son autonomie grâce à sa télécommande. Bouton blanc : avant / Bouton vert : arrière.

## Coloris

Revêtement **PVC/PU**

Imperméable

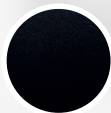

Noir



Framboise

Revêtement polyester

**Velours** déperlant



Grège



Marron

**Tissu** chiné



Gris

## Options



Tablette latérale



Coussin Visco Classe II



Tablette ventrale



Cale-tronc



Surpalette

# Signature

Couettes amovibles lavables  
en machine à 

## 2 BREVETS FRANÇAIS

- 1 seul moteur gère  
repose-jambes + assise + dossier
- Système d'aide au franchissement  
pour personne seule



Brevets déposés

Finition Tissu Gris Chine

# CARACTÉRISTIQUES

## Fauteuil électrique avec ou sans aidant

Possibilité de prise  
en charge sur recommandations  
médicales spécifiques

### Mobilité



### Se relever sans effort



### Autonomie électrique



### Bien-Etre & Confort



Avec fonction **STOP&START**  
Pose intermédiaire en assise  
horizontale pour plus  
de sécurité.

• **Un kit mains libres  
de série permet  
davantage de sécurité.**

### • Télécommande verrouillable

- Appuyer 5 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert) : La télécommande est verrouillée
- Appuyer à nouveau 5 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert) : La télécommande est déverrouillée.

Assise Classe II intégrée  
Siège destiné à un usage  
intérieur exclusif.

Pieds 4 roulettes diam 100 mm

### Repose jambe coordonné à l'inclinaison de l'assise

- **Inclinaisons** : 30°
- **Hauteur sol assise** : 48 cm
- **Options disponibles** :
  - Tablette latérale
  - Cale tronc
- **Garanties** : 2 ans
- **Poids maximum** : 130 kg
- **Largeur hors tout du fauteuil** :
  - Largeur d'assise + 23 cm

# Le Premium

## Electrique

Agréé CERAH

Le fauteuil PREMIUM est un fauteuil 3 fonctions électriques permettant de conserver son autonomie.

- Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction d'AUTONOMIE électrique (Bouton Blanc : avant / Bouton Vert : arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
- Le bouton Bleu permet d'actionner le système DETENTE programmé pour modifier automatiquement l'inclinaison de votre fauteuil, permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations - programme de 35 mn).
- Le bouton Jaune active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 mn).

Assise anti-escarres Classe II insérée.

TAILLES	Profondeur	Profondeur	Profondeur
Largeur de bassin	46 cm	48 cm	50 cm
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15

## Option




Tablette latérale




Cale-tronc

## Coloris

Revêtement polyester **Velours**  
déperlant & **PVC** imperméable

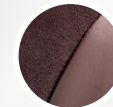

Choco  
Edition

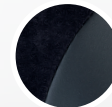


Black  
Edition

Revêtement **PVC/PU**  
imperméable




Cacao

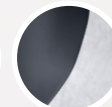

Ebène

## Tissus chiné

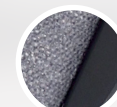

Gris



Citron




Framboise





Accessoires  
de série

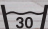

Couettes amovibles lavables  
en machine à  30

*Premium*

Finition polyester Velours Choco Edition



Brevets déposés

## CARACTÉRISTIQUES

### Châssis roulant électrique pour patient avec ou sans aidant

#### Avec fonction STOP&START

Pose intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité.

- **Un kit mains libres de série permet davantage de sécurité.**

#### • Télécommande verrouillable

- Appuyer 5 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert) : La télécommande est verrouillée
- Appuyer à nouveau 5 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert) : La télécommande est déverrouillée.

Assise Classe II intégrée

Siège destiné à un usage intérieur / extérieur.

2 roues arrière 300 mm et 2 roues avant 200 mm

### Repose jambe coordonné à l'inclinaison de l'assise

- **Inclinaisons :** 30°
- **Hauteur sol assise :** 45 cm

#### • Options disponibles :

- Tablette rangement verticale
- Cale tronc droit ou gauche

#### • Garanties 2 ans

#### • Poids maximum 130 kg

#### • Largeur hors tout du fauteuil :

- Largeur d'assise + 23 cm

Possibilité de prise en charge sur recommandations médicales spécifiques

**Mobilité**  
★★★★★

**Se relever sans effort**  
☆☆☆☆☆

**Autonomie électrique**  
★★★★★

**Bien-Etre & Confort**  
★★★★☆

# L'Elysée

## — Electrique —

Agréé CERAH

Le fauteuil Elysée est un châssis roulant permettant de conserver son autonomie grâce à sa télécommande (Bouton blanc : avant / Bouton vert : arrière). C'est un produit compact pratique et mobile (usage intérieur / extérieur)

Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi allongée. De plus, sa largeur et celle de l'assise sont identiques dans le but de garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort.

Il est équipé d'un système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant.

La convivialité et la dignité de l'utilisateur sont préservées par un fauteuil dont la hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.

Assise anti-escarres Classe II insérée.

TAILLES Largeur de bassin	Profondeur 46 cm	Profondeur 48 cm	Profondeur 50 cm
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15

## Option



Cale-tronc




Tablette de rangement verticale

## Coloris

Revêtement polyester **Velours** déperlant & **PVC** imperméable



Choco Edition

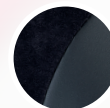

Black Edition

Revêtement **PVC/PU** imperméable



Cacao



Ebène

Tissus chiné



Gris




Citron



Framboise

# Elysée

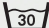Couettes amovibles lavables  
en machine à  30

Accessoires  
de série



Finition PVC/PU Framboise



Brevets déposés

## CARACTÉRISTIQUES

### Châssis roulant manuel pour patient avec aidant

Siège destiné à un usage intérieur / extérieur.

2 roues arrière 300 mm et 2 roues avant 200 mm

Repose jambe manuel à crémaillère (6 positions)

- **Inclinaisons** : 30°
- **Hauteur sol assise** : 45 cm
- **Options disponibles** :
  - Tablette rangement verticale
  - Cale tronc droit ou gauche
- **Garanties** 2 ans
- **Poids maximum** 130 kg
- **Largeur hors tout du fauteuil** :
  - Largeur d'assise + 23 cm

Assise Classe II intégrée

Possibilité de prise en charge sur recommandations médicales spécifiques

#### Mobilité

★★★★★

Se relever sans effort

☆☆☆☆☆

Autonomie électrique

☆☆☆☆☆

Bien-Etre & Confort

★★★★☆

# L'Elysée

## Manuel

Agréé CERAH

Le fauteuil Élysée est un châssis roulant pensé pour les patients nécessitant l'aide d'un accompagnant.

C'est un produit compact pratique et mobile (usage intérieur / extérieur).

Il est équipé d'un concept de repose-jambes manuel, réglable par crémaillère (6 positions).

Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi allongée.

Il est équipé d'un système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant.

La convivialité et la dignité de l'utilisateur sont préservées par un fauteuil dont la hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.

Assise anti-escarres Classe II insérée.

TAILLES	Profondeur 46 cm	Profondeur 48 cm	Profondeur 50 cm
Largeur de bassin			
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15

### Tissus chiné



Gris

### Option




Cale-tronc



Tablette de rangement verticale

### Coloris

Revêtement polyester **Velours** déperlant & **PVC** imperméable

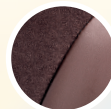

Choco Edition



Black Edition

Revêtement **PVC/PU** imperméable



Cacao



Ébène



Citron




Framboise

# Elysée

Accessoires  
de série



Couettes amovibles lavables  
en machine à 



Brevets déposés

Finition PVC/PU Citron

## CARACTÉRISTIQUES

Possibilité de prise en charge sur recommandations médicales spécifiques

### Mobilité



### Se relever sans effort



### Autonomie électrique



### Bien-Être & Confort



## Fauteuil manuel pour patient avec aidant

Siège destiné à un usage intérieur exclusif.

Pieds 4 roulettes diam 100 mm

## Repose jambe manuel à crémaillère (6 positions)

- **Inclinaisons** : 30°
- **Hauteur sol assise** : 45 cm
- **Options disponibles** :
  - Tablette rangement verticale
  - Cale tronc droit ou gauche
- **Garanties** : 2 ans
- **Poids maximum** : 130 kg
- **Largeur hors tout du fauteuil** :
  - Largeur d'assise + 23 cm

Assise Classe II intégrée

# Le Montmartre

## Manuel

Agréé CERAH

Le fauteuil Montmartre est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant (usage intérieur exclusif).

Son repose-jambes est adapté à la largeur d'assise pour un meilleur confort. Un système manuel par crémaillère propose 6 positions de confort.

Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi-allongée.

La convivialité et la dignité de l'utilisateur sont préservées par un fauteuil dont la hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.

Assise anti-escarres Classe II insérée.

TAILLES Largeur de bassin	Profondeur 46 cm	Profondeur 48 cm	Profondeur 50 cm
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15

## Option




Cale-tronc




Tablette de rangement verticale

## Coloris

Revêtement polyester **Velours** déperlant & **PVC** imperméable

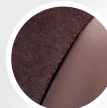

Choco Edition

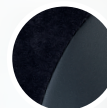

Black Edition

Revêtement **PVC/PU** imperméable




Cacao



Ebène

## Tissus chiné

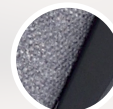

Gris



Citron



Framboise



Accessoires  
de série



Couettes amovibles lavables  
en machine à 

*Montmartre*

Finition polyester Velours Black Edition



Brevets déposés