

7j/7
24h/24

MAINTIEN ET HOSPITALISATION À DOMICILE



LV MEDICAL

location / vente
conseil / livraison
à domicile gratuite

www.lv-medical.fr

MAINTIEN A DOMICILE

Lit médicalisé
Matelas anti-escarres
Soulève personne
Fauteuil releveur
Fauteuil coquille
Chaise percée / douche
Réhausseur wc



VIE QUOTIDIENNE

Tire lait électrique
Berceau
Compléments alimentaires
Aide techniques
Téléphone
Tensiomètre...



MOBILITÉ

Fauteuils roulants
(manuels, électriques)
Scooters
Tricycles
Déambulateurs
Cannes



ESTHETIQUE

Prothèses mammaires
Prothèses capillaires
Lingerie



ORTHOPÉDIE

Chaussons, chaussures
Chaussettes, bas de contention
Prothèses



CONFORT HYGIÈNE

Incontinence
Fauteuils releveur
Coussins, oreillers
Vêtements, gants, ceintures
Désinfection
Siège de bain / douche

12 rue d'Anchin - 59146 Pecquencourt

03 27 08 19 08

6 pl. du Gal de Gaulle - 59310 Orchies

03 20 05 37 93

Agréé toutes caisses d'assurance maladie : sécurité sociale, Msa, Sncf, Rsi, Carmi... **Tiers payant.**

2018

NAUSICAA
Médical

Textile 2018

TRANSFERTS

Sangles de transferts manuels
Sangles de releveurs-mobiles
Sangles de lève-personnes


AUTOUR DU FAUTEUIL

Maintien modulable
Maintien abdominal
Maintien de buste
Maintien pelvien
Maintien intégral
Divers maintien

AUTOUR DU LIT

Accessoires de lit

www.nausicaa-medical.com

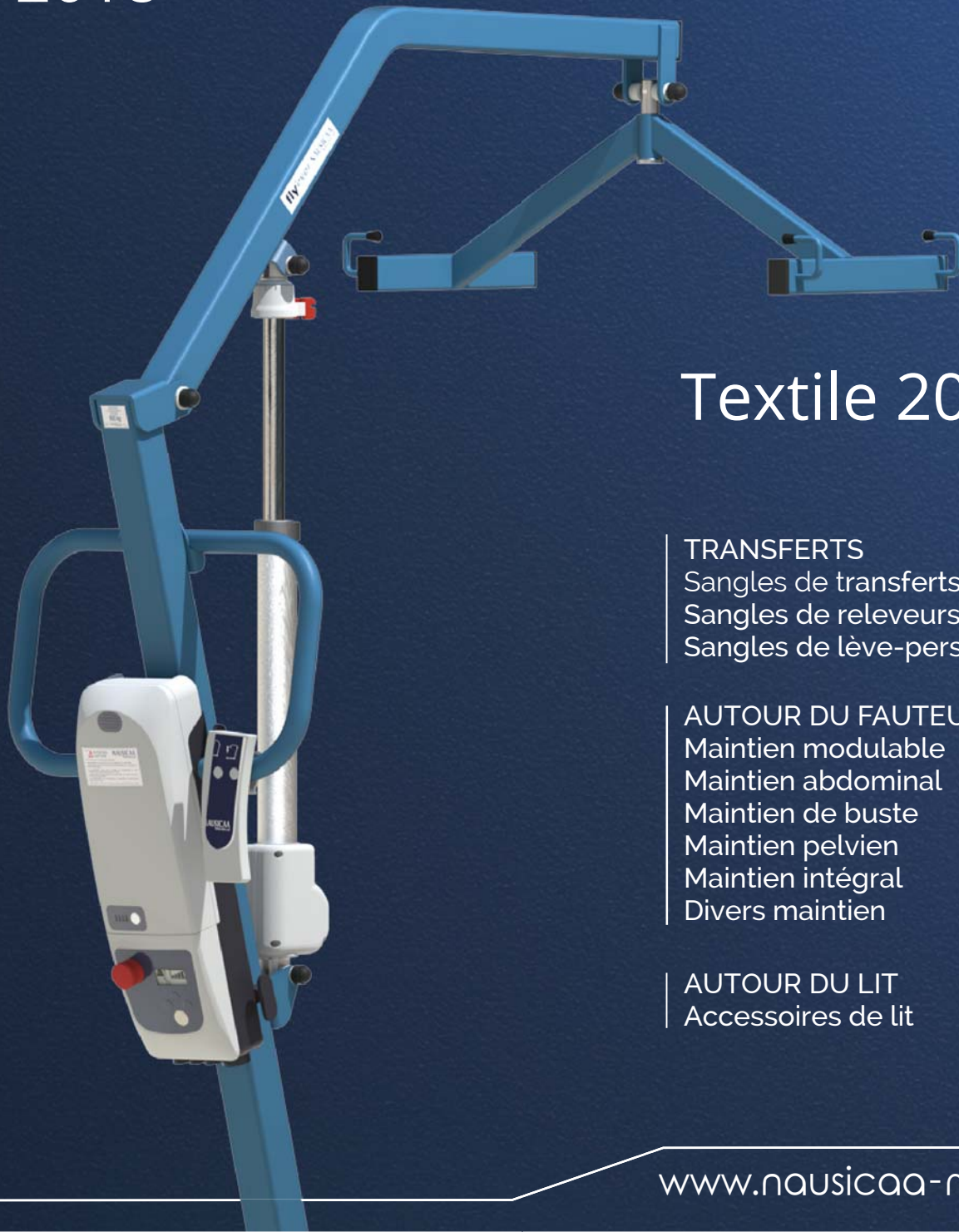

TRANSFERTS MANUELS



Il s'agit d'effectuer un transfert sans système motorisé, cela doit être une aide sécurisée et confortable pour le patient et le soignant.

Le transfert manuel doit être privilégié face au transfert motorisé chaque fois que l'état du patient le permet.

Le transfert manuel aide à lutter contre la grabatisation et fait de geste simple du quotidien, un formidable moyen de rééducation et d'échange social entre le patient et les équipes soignantes.

CEINTURE DE RELEVAGE



CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE

La Ceinture de Relevage s'utilise pour lever une personne assise et préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES

CREL-PF-
M ou L

Prix public T.T.C.
(TVA 20%)

60,00 €

En tant qu'aide à la marche, cette ceinture s'utilise sur le patient comme un accompagnement.

Pour le relevage, elle s'utilise autour de la taille du patient pour servir de point de préhension au soignant ou l'inverse ou les deux.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES

CADM-PF-
S ou M ou L ou XL

Prix public T.T.C.
(TVA 20%)

70,00 €

SANGLE ACTIV'UP



Permet d'accompagner le patient pendant le processus de levage et peut servir de dossier pour les positions assises.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ACT-SGL-PF	50,00 €

RÉHAUSSE ACTIV'UP



La réhausse augmente la hauteur du mât de 14 cm



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ACT-RAL	35,00 €



GAMME SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES

NAUSICAA Médical propose une gamme complète de sangles de releveurs-mobiles conformes à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007.

Nos sangles sont développées et améliorées en collaboration avec des professionnels de santé (ergothérapeutes et personnel soignant).



Pour chacun de nos releveurs-mobiles, nous proposons une sangle adaptée garantissant la sécurité du patient. Une évaluation du patient doit être effectuée afin d'utiliser le système (appareil + sangle) le plus sûr et le plus confortable pour le patient et le soignant.

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSU

Les sangles sont en jersey de polyester, un tissu très facile à manipuler, qui procure un maintien optimisé et confortable.

LAVAGE

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

LÉGISLATION REACH

Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.


GUIDE D'UTILISATION

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

TAILLES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
TOUR DE POITRINE	70/90	90/115	115/140	140/165	154/186	172/206	196/232
ENTRE LA TAILLE ET LES HANCHES	70/90	90/115	115/140	140/165	154/186	172/206	196/232

Pour sélectionner la taille d'une sangle, il faut faire correspondre le tour de poitrine (sangle sous-axillaire) ou de taille (sangle dorsale et sangle d'aide à la déambulation) avec les cotes présentes sur les documentations.

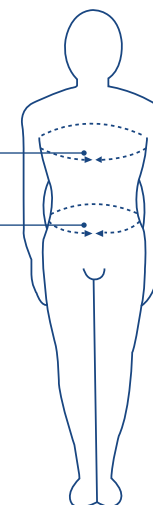

Avant d'utiliser un releveur-mobile, sont à prendre en compte : le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.

Produits	BLUE WAYUP (pages 24-25)	BLUE WAYUP ECP (pages 26-27)	WAYUP (pages 30-31)	WAYUP ECP (pages 32-33)	EASYLEV (pages 36-37)	EASYLEV ECP (pages 38-39)	WAYUP 200-300 (pages 42-43)	EASYLEV 200-300 (pages 44-45)
Sangles								
SANGLE ÉCO (page 48)	★	★	★	★	★	★	★	★
SANGLE SOUS-AXILLAIRE (page 48)	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
SANGLE DORSALE (page 49)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION (page 49)		★★★★		★★★★			★★★★	

SANGLE ÉCO



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.
Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.
Cette sangle est en taille unique.



JERSEY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SXPECO-PF-TU	72,00 €

SANGLE SOUS-AXILLAIRE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.
Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.
Cette sangle est disponible en 7 tailles du S au 4XL.



JERSEY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SAPVR-PF-S ou M ou L ou XL	140,00 €
SAPVR-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	350,00 €

SANGLE DORSALE



La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.



JERSEY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYP-PF-S ou M ou L ou XL	140,00 €
SWYP-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	350,00 €

SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Ses jambières lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.



JERSEY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYD-PF-S ou M ou L ou XL	165,00 €
SWYD-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	400,00 €

SANGLES DE LÈVE-PERSONNES



NAUSICAA Médical, premier fabricant Français de sangles de lève-personnes depuis 1993, propose une gamme complète pour tous les patients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007 ainsi qu'à la législation REACH.



Elles s'adaptent et sont compatibles avec tous les lève-personnes mobiles comportant un système d'accroches équivalent (certificat de compatibilité sur demande).

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSUS

En fonction du modèle de sangles, nous vous proposons deux types de tissus en polyester :

JERSEY : très facile à manipuler, procure un maintien optimisé et confortable

FILET : idéal pour le bain et la toilette, évite la macération et facile à sécher

En option, les sangles peuvent être réalisées en vinyle (sur devis).

LAVAGE

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

CONFORMITÉ REACH

Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.

OPTIONS

Sur certains modèles, l'ajout d'une têtère amovible permet de prendre en charge la tête du patient et protège les cervicales.


KIT SANGLES



Le kit vous permet de valider le bon choix d'une sangle, car pour des raisons d'hygiène une sangle qui a été déballée ne peut être reprise.

Ce kit est composé de 4 sangles en taille unique, ce qui correspond à la taille L, permettant de déterminer la taille (S, M, L et XL).

Les sangles représentent les 4 types de coupes (U, U évasée, Toilette et Hamac), ainsi que les différentes matières (filet ou jersey) et les différentes finitions (simple ou confort).

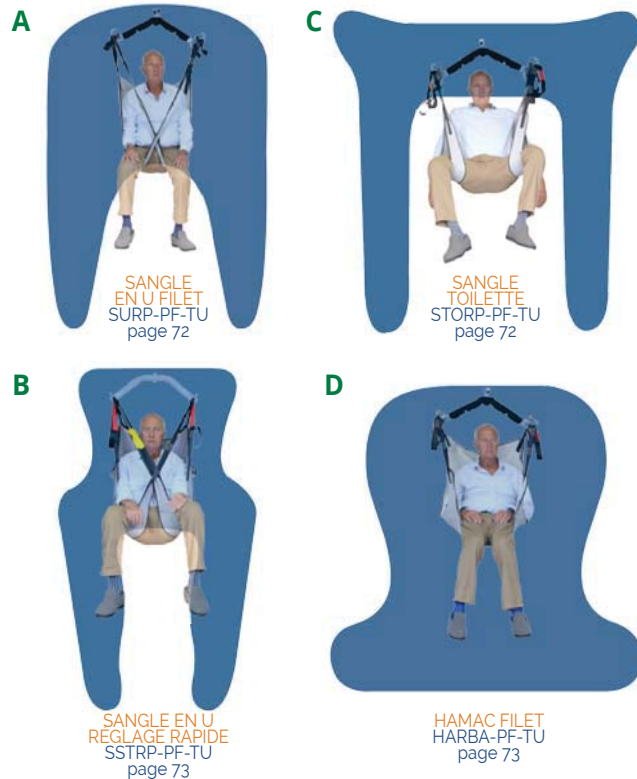

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
KIT-SGL	199,00 €



A SANGLES EN U TAMOV

A1 Taille unique SURPC-PF-TU Jersey SURP-PF-TU Filet page 72

A2 4 Tailles S/M/L/XL SUCBAS-PF Jersey SUBAIT-PF Filet page 74

A3 4 Tailles S/M/L/XL SLK-PF Jersey page 75

A4 4 Tailles S/M/L/XL SGLDOS-PF Jersey page 75

B SANGLES EN U EVASEES TAMOV

B1 Taille unique SSTRP-PF-TU Jersey page 73

B2 4 Tailles S/M/L/XL SSTBA-PF Filet page 76

B3 4 Tailles S/M/L/XL SML-PF Jersey page 76

B4 4 Tailles S/M/L/XL SMB-PF Jersey page 77

C SANGLES DE TOILETTES TABAL

C1 Taille unique STORP-PF-TU Jersey page 72

C2 4 Tailles S/M/L/XL SATL-PF Jersey page 82

C3 4 Tailles S/M/L/XL STO-PF Jersey page 82

D SANGLES HAMAC TAMOV

D1 Taille unique HARBA-PF-TU Filet page 73

D2 4 Tailles S/M/L/XL SHAC-PF Jersey SHATBA-PF Filet page 78

D3 4 Tailles S/M/L/XL SUCPEHAT-PF Jersey SUCBAHA-PF Filet page 79

AIDE AU CHOIX

	Sangle laissée sous le patient au fauteuil	Sangle retirée au fauteuil	Toilette et mise au WC
- Perte de tonicité membres inférieurs et bon maintien de buste et de tête	D1, D2	A1, A2, B1, B2	C1, C2, C3
- Perte de tonicité membres inférieurs et aucun maintien de buste avec bon maintien de tête	D1, D2	A1, A2, B1, B2	C3
- Perte de tonicité membres inférieurs, aucun maintien de buste et sans un bon maintien de tête	D1, D2 avec une tête	A4, B3, B4	D3 avec une tête
- Patient amputé	D3	D3	D3
- Patient agité	D3	A3, A4	D3
- Patient spastique	D3 avec une tête	A4, B3, B4	C2, C3 avec une tête
- Patient dépendant physique et psychique	D1, D2	A3, A4, B3, B4	D3
- Contre-indication de constrictions des hanches	D3	C2	C2

Choix conseillé

Choix secondaire

SANGLE EN U ÉCO

(confort ou filet)



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.


La mousse confort (SURPC) dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

JERSEY



FILET

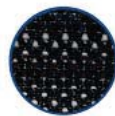

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SURPC-PF-TU (jersey)	57,00 €
SURP-PF-TU (filet)	52,00 €

SANGLE CONFORT DE TOILETTE ÉCO

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle est déconseillée aux patients à très faible tonicité.


Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur d'où sa forme droite.

JERSEY




Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STORP-PF-TU	68,00 €

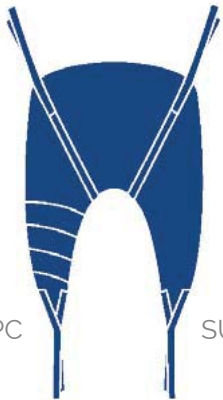

SURPC

SURP

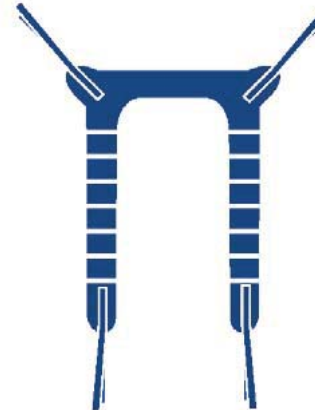

SANGLE CONFORT ÉCO À RÉGLAGE RAPIDE

GARANTIE 1 AN

Kg 320

70°

REACH

CE

Made in France

HAMAC ÉCO FILET

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteur) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.




JERSEY




B1



FILET

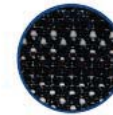

D1

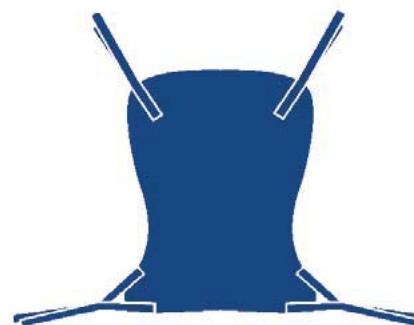

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SSTRP-PF-TU	65,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
HARBA-PF-TU	51,00 €

SANGLE EN U CONFORT



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



JERSEY



A2



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAS-PF- S ou M ou L ou XL	100,00 €

SANGLE EN U FILET (avec têteière)

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert. Elle est dotée d'une têteière à attaches.



FILET



A2



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUBAIT-PF- S ou M ou L ou XL	120,00 €

SANGLE CONFORT EN U ENVELOPPANTE



SANGLE À DOSSERET CONFORT

La tête intégrée baleinée et la forme enveloppante de la sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Sa forme en U associée à la partie filet sous-fessière, permettent une mise en place et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La partie dos prolongée par la tête en mousse rigide et le baleinage complet permettent de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

JERSEY



JERSEY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SLK-PF- S ou M ou L ou XL	180,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI


RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SGLDOS-PF- S ou M ou L ou XL	190,00 €

SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE (avec tête)



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. La tête intégrée et baleinée protège les cervicales lors d'un ramassage au sol. Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

JERSEY

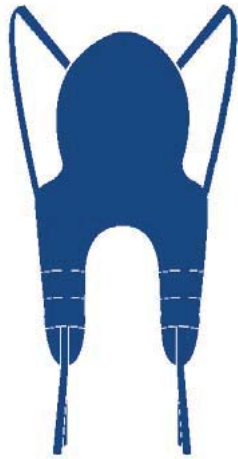

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SML-PF- S ou M ou L ou XL	155,00 €

SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

FILET



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SSTBA-PF- S ou M ou L ou XL	105,00 €

SANGLE CONFORT ERGONOMIQUE

GARANTIE **1** AN

Kg
320

70°

REACH

CE

Made in France

TÊTIÈRES AMOVIBLES

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, augmente le confort et permet de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.



JERSEY



B4



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SMB-PF- S ou M ou L ou XL	210,00 €



La tête amovible TAMOV-PF s'utilise sur les sangles :

SURPC-PF et SURP-PF (page 72)
SSTRP-PF et HARBA-PF (page 73)
SUCBAS-PF (page 74)
SSTBA-PF (page 76)
SHAC-PF (page 78)
SUCBAHA-PF (page 79)



La tête amovible et baleinée TABAL-PF s'utilise sur les sangles :

SATL-PF et STO-PF (page 82)



La tête amovible et baleinée TAMAX-PF s'utilise sur les sangles :

SUCBAS-PF (XXL) (page 80)
STO-PF (XXL) (page 81)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TAMOV-PF	35,00 €
TABAL-PF	45,00 €
TAMAX-PF	80,00 €

HAMAC CONFORT STANDARD



Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mousse confort sous les jambes réduit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

JERSEY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SHAC-PF-S ou M ou L ou XL	90,00 €

HAMAC FILET (avec têteière)

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

Elle est dotée d'une têteière à attaches.

FILET



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SHATBA-PF-S ou M ou L ou XL	85,00 €

HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (avec tête)



C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.


Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle fait office de hamac percé.

Elle est dotée d'une tête à attaches.

JERSEY

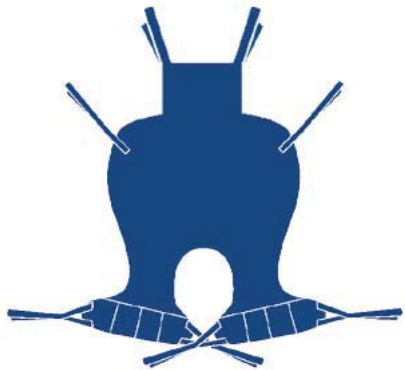

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHAT-PF-S ou M ou L ou XL	150,00 €

HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT



C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Elle fait office de hamac percé.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

FILET

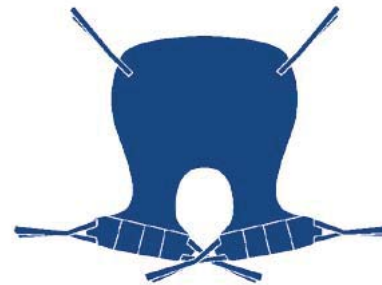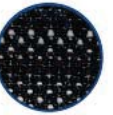

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAHA-PF-S ou M ou L ou XL	135,00 €

SANGLE EN U CONFORT XXL



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



JERSEY



A2



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAS-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	200,00 €

SANGLE FILET EN U CONFORT XXL

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert. Elle est dotée d'une tête à attaches.



FILET



A2



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUBAIT-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	260,00 €

HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT XXL




C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle est également dotée d'une tête à attaches.

JERSEY

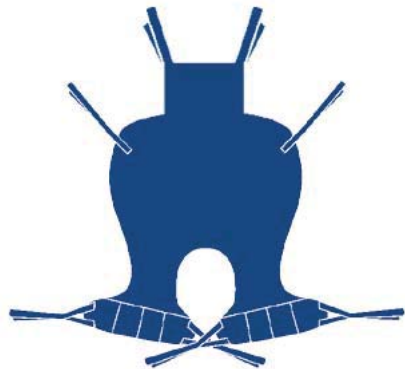

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI


RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHAT-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	260,00 €

SANGLE CONFORT DE TOILETTE XXL

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle. Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

JERSEY

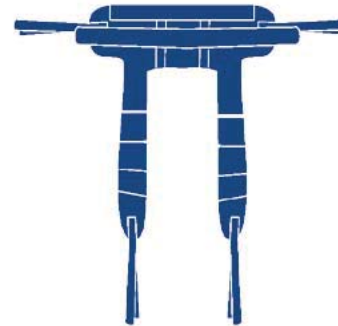

*photo prise avec option
tête TAMAX (page 77)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STO-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	360,00 €

SANGLE CONFORT DE TRANSFERT RAPIDE

GARANTIE 1 AN

Kg 320

70°

REACH

CE

Made in France


Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle. Le passage des jambes se fait de l'intérieur vers l'extérieur (d'où sa forme échancrée). Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

Cette sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.

JERSEY



C2

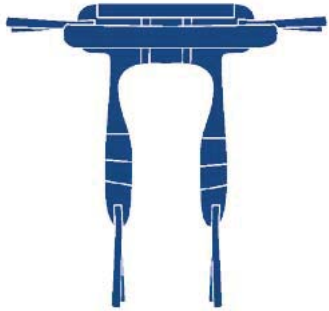

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SATL-PF- S ou M ou L ou XL	220,00 €

SANGLE CONFORT DE TOILETTE


Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle. Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

JERSEY




C3

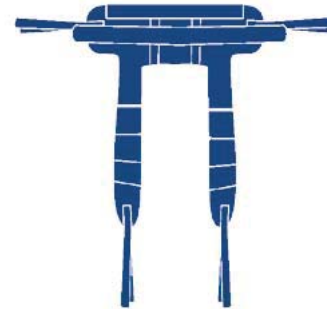

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STO-PF- S ou M ou L ou XL	155,00 €

MAINTIEN

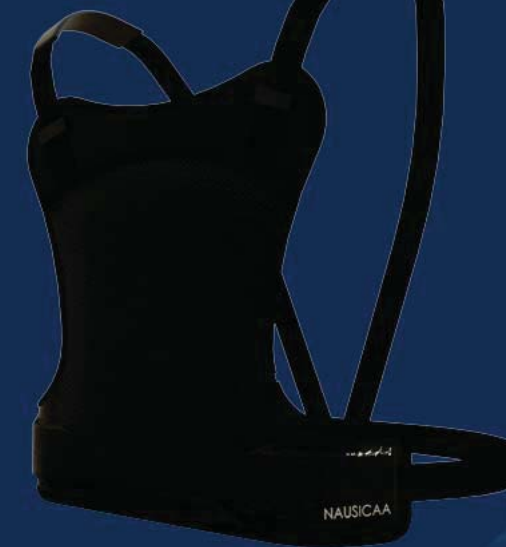

GAMME MAINTIEN

Notre gamme Maintien, certifiée CE et en conformité avec la législation REACH, participe à la recherche d'une bonne posture du patient tout en prévenant le risque de chute.

Notre gamme est développée en collaboration avec des professionnels de santé (ergothérapeutes et personnel soignant) dans le but de garantir le meilleur soutien possible pour le patient ainsi qu'une installation rapide et facile pour le soignant.

Les articles de cette gamme sont disponibles en 2 versions :

- les produits lavables à 30°C sont fabriqués dans un complexage de mousse composé de Bengaline coton/polyester sur une face et de jersey/polyester sur l'autre face.
- les produits lavables à 70°C (dont les références contiennent "HP") sont fabriqués dans un complexage de mousse et, sur 2 faces, d'une enduction de jersey/polyuréthane, imperméable et respirante.

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

CONFORMITÉ REACH

Nos produits sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.

AIDE AU CHOIX



Le dos plaqué au dossier et les fesses au fond de l'assise

Taille unique
Modulable



CECO-PF-A
(page 88)

Taille unique
Modulable



YZACA-PF
(page 89)



CCS-PF-
80/95/110/130
(page 90)

Taille unique



CC-MED-PF
(page 90)



CCA-PF-
T S/M/L/XL
(page 91)

Taille unique
Modulable



Le bassin glisse vers l'avant



CECO-PF-A
+ CECO-MP
(page 88)

Taille unique
Modulable



YZACA-PF
+ YZA-MP
(page 89)



CPCF-PF-
T S/M/L
(page 94)



CPE-PF-
T S/M/L
(page 94)



CSP-PF-
80/95/110/130
(page 95)



CBR-PF-
S/M/L/XL
(page 95)

AIDE AU CHOIX



Aucune tenue sur le fauteuil

Taille unique
Modulable



CECO-PF-B
+ CECO-MP
(page 88)

Taille unique
Modulable



YZACA-PF
+ YZA-MP
+ YZA-MB
(page 89)

Taille unique
Modulable



YZAGB-PF
+ YZA-MP
(page 89)



CSYP-PF-
80/95/110/130
(page 96)



CBIM-PF-
T S/M/L
(page 96)



CBRIN-PF-
T S/M/L/XL
(page 97)



Le buste part vers l'avant

Taille unique
Modulable



CECO-PF-B
(page 88)

Taille unique
Modulable



YZACA-PF
+ YZA-M
(page 89)

Taille unique
Modulable



YZAGB-PF
(page 89)



CSY-PF-
80/95/110/130
(page 92)



CMB-PF-
T S/M/L
(page 92)



CGI-PF-
T S/M/L
(page 93)

CEINTURE ÉCO MODULABLE



Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CECO-PF-A	30,00 €
CECO-MP	10,00 €

CEINTURE DE BUSTE ÉCO MODULABLE

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CECO-PF-B	45,00 €
CECO-MP	10,00 €

CEINTURE YZA



Réf HP



Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.



Pour plus de confort et préserver le tonus du patient, faites évoluer le maintien en fonction de sa tenue posturale.
Le système YZA s'adapte à toutes les morphologies.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
YZACA-PF YZACAHP-PF	65,00 €
YZA-MP YZA-MB	20,00 €

GILET YZA

Une gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d'un maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
YZAGB-PF YZAGBHP-PF	100,00 €
YZA-MP	20,00 €

CEINTURE SLIM



Réf HP

Ce système simple et robuste est commun à toutes les ceintures SLIM.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :
 - S 60 / 80
 - M 75 / 95
 - L 90 / 110
 - XL 110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCS-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	45,00 €
CCSHP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	

CEINTURE ÉCO

Simple et en taille unique, elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Périmètre maximum utile : 164 cm
- Sans contrainte de tailles



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCMED-PF	40,00 €
CCMED-HP-PF	

CEINTURE ABDOMINALE LARGE



Réf HP



Sa large surface de contact évite toute constriction abdominale.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S	60 / 90
M	80 / 105
L	95 / 125
XL	115 / 145



**Le maintien abdominal vous permet
de sécuriser un patient qui pratique
la déambulation podale.**



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CCA-PF- S ou M ou L ou XL	65,00 €
CCAHP-PF- S ou M ou L ou XL	

CEINTURE SLIM Y



Réf HP

MAINTIEN DE BUSTE

Les hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSY-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	85,00 €
CSYHP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	

Il procure un confort renforcé du buste.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 190 cm



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CMB-PF- S ou M ou L	50,00 €
CMBHP-PF- S ou M ou L	

GILET INTÉGRAL



Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules dégrafables.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 220 cm



Le maintien de buste vous permet de redresser le buste du patient, évitant ainsi les cyphoses cervicales à l'origine de graves troubles de la déglutition, entraînant la dénutrition et accélérant ainsi la grabatisation.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CGI-PF- S ou M ou L	110,00 €

CEINTURE MINI-PELVIENNE



Réf HP



CEINTURE PELVIENNE CONFORT

Elle est fabriquée en filet polyester haute résistance.

- Déclinée en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80
M 70 / 100
L 90 / 130



Sa protection interne en STÉRITHANE la rend imperméable tout en étant respirante.

- Déclinée en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80
M 70 / 100
L 90 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CPE-PF- Sou M ou L	38,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CPCF-PF- Sou M ou L	55,00 €
CPCFHP-PF- Sou M ou L	

CEINTURE SLIM PELVIENNE



Réf HP

Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation).

• Tour de taille (en cm) :

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	75,00 €
CSPHP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	

CEINTURE BIRDY

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Tour de taille (en cm) :

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	105 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBR-PF- S ou M ou L ou XL	85,00 €
CBRHP-PF- S ou M ou L ou XL	

CEINTURE SLIM Y ET PELVIENNE



Réf HP



BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation).

• Tour de taille (en cm) :

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSYP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	100,00 €
CSYPHP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	

Fabriquée en complexage de mousse, il procure un confort complet.

- Décliné en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S	50 / 80
M	70 / 100
L	90 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBIM-PF- S ou M ou L	105,00 €
CBIMHP-PF- S ou M ou L	

CEINTURE BIRDY INTÉGRALE



Réf HP

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne. Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Tour de taille (en cm) :

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	105 / 130



Le maintien intégral permet de positionner au fauteuil un patient qui n'aurait pas suffisamment de tonus pour y rester, l'obligeant ainsi à rester alité ce qui accélère la grabatisation.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBRIN-PF- S ou M ou L ou XL	120,00 €
CBRINHP-PF- S ou M ou L ou XL	

MOUFLES DE SÉCURITÉ



Les Moufles de Sécurité empêchent le patient de s'enlever les dispositifs de soins ainsi que les protections contre l'incontinence.

La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage aluminium intégré évite la flexion de la main.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMMFL-HP (par paire)	75,00 €

MAINTIEN DE PIED

Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMDP-HP (par paire)	65,00 €

ÉCHARPES DE BRAS



ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST

Elles sont confortables et équipées d'un repose-pouce.

L'addition d'une sangle dorsale permet de maintenir l'écharpe contre le corps de l'utilisateur (ECBSM).



ECBSM



ECB



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
ECBSM- 1 ou 2 ou 3	40,00 €
ECB- 01 ou 02 ou 03	30,00 €

L'Écharpe Dynamique HOLST est conçue dans le but de prévenir ou de réduire totalement la subluxation gléno-humérale (source de douleurs), tout en permettant une mise en place quotidienne et autonome par les patients hémiplegiques.

La sangle élastique exerce une traction verticale sur l'humérus en appliquant la force de traction sur le coude et sur l'épaule homolatérale.

Il existe un modèle pour l'épaule droite (EC-HSTD) ou gauche (EC-HSTG).



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
EC-HST- G ou D	90,00 €

ACCESSOIRES DE LIT

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT



Les protections en mousse s'installent sur les barrières de lit évitant ainsi au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaïse est classée au feu M1.

PETIT MODÈLE
PRO-BAR-M
140x36x3 cm



GRAND MODÈLE
PRO-BAR-L
182x36x3 cm



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
PRO-BAR-M (la paire)	100,00 €
PRO-BAR-L (la paire)	120,00 €

CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT



Réf HP

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit. Elle procure au patient un positionnement sécurisé.
Compatible avec le système NAUSI-SURE (fermeture magnétique).

MISE EN PLACE :

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier.
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension.
- Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.
- Reproduire l'opération pour l'autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par dessus le patient, puis régler la tension.



La boucle est accessible au patient (maintien)



Avec option boucle NAUSI-SURE (contention)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CMLPHP-PF S ou M ou L ou XL	100,00 €

MOUFLES DE GLISSE DRAPS DE GLISSE (sans et avec poignées)



Réf HP

Pour la manipulation d'un patient, les Mouffles et les Draps de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques aux soignants.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
MDG (par paire)	35,00 €
MDG (par 5 paires)	140,00 €



	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
1 PIÈCE	DGL-195-70	65,00 €	DGL5-195-70	260,00 €
	DGL-140-110	70,00 €	DGL5-140-110	280,00 €
	DGL-130-70	45,00 €	DGL5-130-70	180,00 €
	DGL-80-70	35,00 €	DGL5-80-70	140,00 €
	DGL-48-48	25,00 €	DGL5-48-48	100,00 €
5 PIÈCES				



	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
1 PIÈCE	DTR-195-70	75,00 €	DTR5-195-70	300,00 €
	DTR-140-110	80,00 €	DTR5-140-110	320,00 €
	DTR-130-70	55,00 €	DTR5-130-70	220,00 €
5 PIÈCES				



PAIRE D'ATTACHES DE POIGNETS (LMATPO)

Les Attaches de poignets sont installées autour des poignets du patient afin d'éviter des contusions et des blessures dues à l'arrachement de perfusions par exemple.



PAIRE D'ATTACHES POIGNETS DE SÉCURITÉ (LMATPOS)

Une version sécurité est disponible pour le maintien de patients très agités.



ATTACHES DE CHEVILLES (LMATCH)

Elles permettent de maintenir les jambes légèrement écartées pour éviter les risques d'irritations.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMATPO	35,00 €
LMATPOS	50,00 €
LMATCH	35,00 €

Les Talonnières permettent d'envelopper le pied dans un revêtement confort, prévenant ainsi les frottements sur les talons et les malléoles.



Petit modèle (LMTAL1)



Grand modèle (LMTAL2)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMTAL1	45,00 €
LMTAL2	65,00 €

PROTECTIONS CLINIQUES DE LITERIE

PV PONGE



Le PV-PONGE est conçu pour protéger efficacement la literie tout en garantissant hygiène et confort au patient, et répond aux exigences médicales.

Il associe le confort d'une bouclette éponge 100% coton et la sécurité de l'imperméabilité conférée par un doublage PVC par contre-collage.

Il est lavable en machine à 60°C, est adapté à un usage domestique et accroît la durée de vie et l'hygiène du matelas.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

STÉRITHANE



Le STÉRITHANE est conçu pour protéger efficacement la literie tout en garantissant hygiène et confort au patient, et répond aux exigences médicales.

C'est une enduction de polyuréthane qui cumule les qualités suivantes :

- respirant, il limite l'effet de macération.
- imperméable, il protège le matériel qu'il recouvre.
- élastique, il est compatible avec les supports de soins et de prévention de l'escarre.

Il est traité antimicrobien et antifongique de manière permanente (Sanitized), et également aux ions d'argent ce qui réduit les problèmes d'odeurs.

Son classement au feu M1 est recommandé pour les collectivités.

Sa surface lisse et lavable à 95°C facilite l'entretien.

Associées à la qualité de fabrication, toutes ces propriétés donnent des articles d'une très grande qualité et d'une longue durée de vie.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

PRODERM



Le PRODERM est conçu pour protéger efficacement la literie tout en garantissant hygiène et confort au patient, et répond aux exigences médicales.

C'est une feuille de PVC imperméable ayant une très grande souplesse, conservée pendant toute la durée du produit, et compatible avec les supports de prévention d'escarre.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI